


ANEXO 9 Fazer Suprimentos: Recipiente Perfurado, Incinerador, Removedor de Bota

Fazer um Recipiente Perfurado:

Se não houver disponível um recipiente resistente perfurado para a recolha agulhas, seringas e outros instrumentos cortantes usados que penetraram na pele do paciente, faça um recipiente usando estas instruções.

Materiais:


- Garrafa de plástico ou recipiente feito de material queimado (garrafas de água vazias de plástico por exemplo)
 - Caixa de papelão para servir como base para conter a garrafa de plástico
 - Fita de plástico
1. Juntar várias garrafas de plástico e caixas feitas de papelão ou outro material forte, material queimado
 2. Ate os lados e cubra a caixa de papelão de modo que o lado de cima esteja fechado
 3. Desenhe um círculo no topo da caixa que tenha o mesmo diâmetro da garrafa de plástico
 4. Corte o círculo e deixe uma abertura no topo da caixa
 5. Coloque a garrafa dentro da abertura. Encha a garrafa com 1/3 de solução alcalina.
 6. Coloque a garrafa com a sua base no quarto do paciente ou onde é usado o equipamento para furar a pele.
 7. No fim do dia, quando o lixo descartável for recolhido, leve a garrafa e a sua base para o local onde se queima o lixo infectado. Coloque a garrafa no buraco para ser queimada

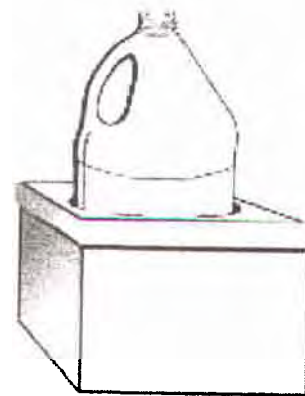

Um recipiente pontiagudo adaptado

Fazer um incinerador: Ver anexo 10.

Fazer um removedor de bota:

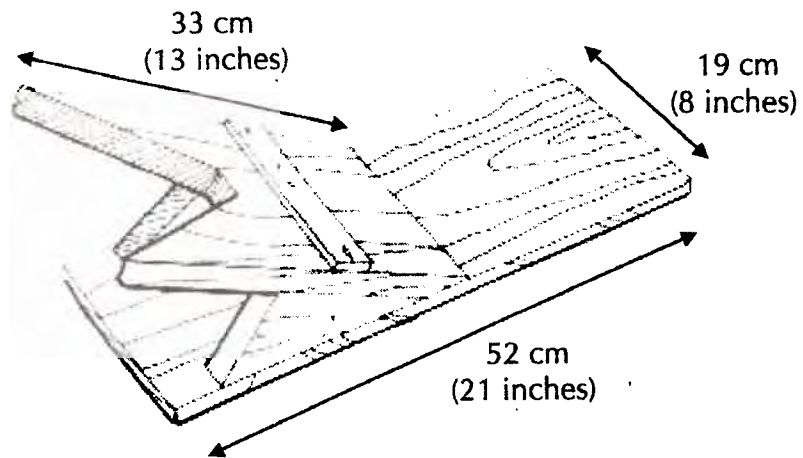

Por favor leve este desenho ao carpinteiro local